

3D ROCKER

JSSK-3D

3D ROCKER PROGRAMMABLE

10 ~ 70 rpm

9° Tilt Angle Motion

350 x 350 mm Platform

JSSK-3D 락커는 다양한 종류의 배스, 플라스크, 바틀, 시험관 등에 담겨진 시료를 실온의 조건에서 혼합 또는 추출하기 위하여 사용됩니다. 생명공학 분야에서 전기영동 후 젤을 염색 하기 위한 용도로 적합하며, 화학, 생명공학, 제약, 농학, 환경 분야의 시료 전처리에 다양하게 사용할 수 있습니다.



Features

제어기능

최첨단 MCU 프로세서와 Tachometer 피드백 제어로
정밀한 속도 조절.

10 단계의 속도/작동시간 프로그램을 최대 6개 까지 저장.

응답성이 뛰어난 정전방식 터치버튼은 다양한 종류의
라텍스 장갑에도 민감하게 작동됨.

사용이 간편한 조그다이얼 방식 인코더를 적용하여 속도제어,
시간설정, 작동, 멈춤, 저장 등 다양한 기능을 손쉽게 사용할 수 있음.

고휘도 그래픽 LCD 디스플레이는 작동 상황을 한눈에 파악할 수
있으며 교반속도 제어 뿐만 아니라 프로그램 작성에도 매우 편리함.

사용편의성

용도에 따라 교체 가능한 플랫폼

적재가능플라스크 수량

16ea x 50/100ml, 9ea x 250/500ml, 5ea x 1L,

4ea x 2L, 2ea x 3L 또는 1ea x 5L

미끄럼 방지기능의 양면 모두 사용 가능한 실리콘 매트
(돌기면/평면)

제품의 성능

교반 속도 10 to 70 rpm

틸팅 각도 9도

디지털 타이머 1min ~ 99hr 59min by 1 min

플랫폼 사이즈 W350 x D350 mm

Slow Start 기능이 장착된 강력한 모터 드라이버

조용하고 내구성이 뛰어난 BLDC 모터

최대적재중량 10 kgs

특장점

BLDC 모터

저중심 설계의 고강도 ABS 플라스틱 본체

안전장치

과부하차단장치

과전류차단장치


JSSK-3D

3D ROCKER

10 ~ 70 rpm
 9° Tilt Angle
 3D Motion
 Platform Size
 350 x 350 mm

프로그램기능

최대 10 스텝 프로그램이 가능하며
 6종류의 프로그램 패턴 저장

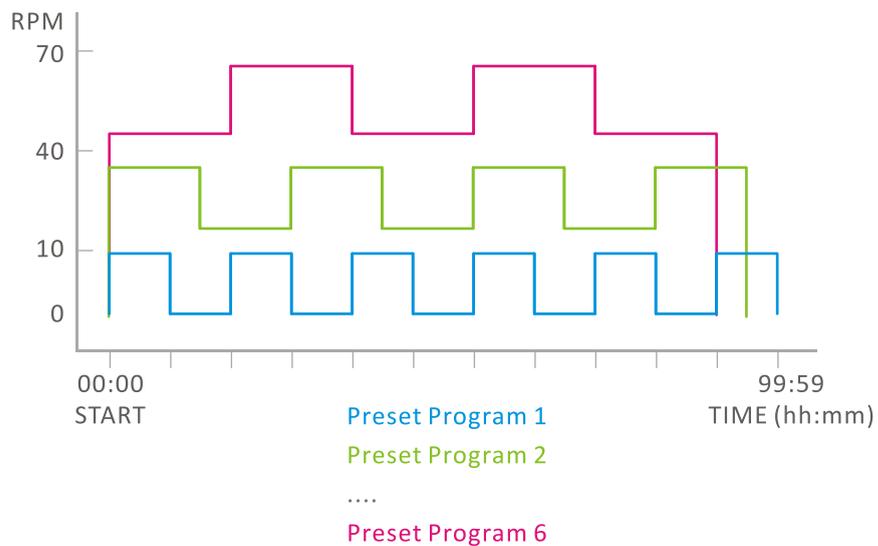

Accessories



PHF-U35 Universal Spring Rack



- PHF-P35SET Universal Platform SET
- PHF-P35 Universal Platform
 - PHF-M35 Silicone Mat
 - PHF-S35 Elastic String Band

Specifications

JSSK-3D

3D ROCKER

10 ~ 70 rpm
9° Tilt Angle
3D Motion
Platform Size
350 x 350 mm

모 델

JSSK-3D

성 능

교반방식	3차원 회전운동
플랫폼 규격 (W x D)	350 x 350 mm
교반속도범위	10 to 70 rpm, 1 rpm 단위 제어
교반각도	기울기 9°
최대적재무게	10 kgs

콘트롤러

타입	디지털마이크로프로세서 PID 속도제어 정전식 터치버튼 인코더 조그 다이얼
타이머	1분 ~ 99 시간 59 분
디스플레이	고해상도 그래픽 LCD 디스플레이
프로그램 기능	6개 프로그램 저장, 10 단계 속도, 교반시간 프로그램

모 터

타입	Brushless DC Motor
구동력	50 Watts
회전방향	시계방향

안전장치

과부하방지장치 / 과전류차단장치

재 질

본체	ABS 플라스틱
플랫폼	Aluminum / Steel

전 원

공급전원	230 +/- 10% VAC 50/60 Hz 단상
소비전력	45 Watt
플러그	220 V 표준 플러그

사용환경

온도 습도	5 °C - 40 °C, 80% RH Max.
-------	---------------------------

JSR

(주)제이에스리서치
충남 공주시 검상고개길 69
Phone: +82-41-856-3677
Fax: +82-41-856-3679
info@jsresearch.co.kr
www.jsr.kr

Ordering Information

JSSK-3D

3D ROCKER

10 ~ 70 rpm

9° Tilt Angle

3D Motion

Platform Size

350 x 350 mm

모 델

JSSK-3D

품 명

3-D Rocker

230 VAC 1 ph 50/60 Hz

악세사리

PHF-P35SET

Universal Platform Set

PHF-P35 Universal Platform

PHF-M35 Silicone Mat

PHF-S35 Elastic String Band

PHF-U35

Universal Spring Rack W350 x D350 mm

PHF-M35

Silicone Mat W350 x D350 mm

PHF-S35

Elastic String Band with Stopper x 2 Set

DISTRIBUTOR

JSR

(주)제이에스리서치

충남 공주시 검상고개길 69

Phone: +82-41-856-3677

Fax: +82-41-856-3679

info@jsresearch.co.kr

www.jsr.kr